

KATALOG



BRILLIANT SMILE™
SWEDEN

NÅGRA ORD FRÅN VÅR VD

Brilliant Smile Sweden är en svensk producent och distributör av exklusiva tandbleknings- och munvårdsprodukter. När företaget grundades år 2003 var tandblekning relativt nytt för allmänheten - det sågs som en lyx endast tillgänglig för kändisar och kungligheter.

Jag såg stor affärspotential i att rikta marknadsföringen direkt mot konsument och efter endast ett år i branschen hade vi lyckats skapa en stor efterfrågan av tandblekning på klinik. Brilliant Smile växte snabbt och är idag det ledande varumärket för tandblekning på den svenska marknaden.

Sedan starten fram till idag har vårt fokus varit att erbjuda sofistikerade premiumprodukter, med överlägsen kvalitet och maximal säkerhet. Vi började med tandblekning på klinik och utvecklade med tiden vårt koncept ytterligare till

hemblekning och munvårdsprodukter. Brilliant Smile Sweden erbjuder idag ett komplett sortiment för tandblekning samt whitening-munvård.

Vi arbetar kontinuerligt med forskning och utveckling för att förbättra och utöka vårt koncept, med målet att alltid kunna erbjuda bästa möjliga kvalitet och utbud till våra värdefulla kunder. Detta tänkesätt har medfört stor framgång för oss och våra partners i det förflutna och vi är hängivna till att fortsätta framåt i samma anda. Vi hoppas att ni vill följa med oss på vår resa mot en spännande framtid.

Stefan Rexdahl
Grundare & VD



INNEHÅLL




Tandblekning på klinik



Tandblekning hemma



Munvård med whitening

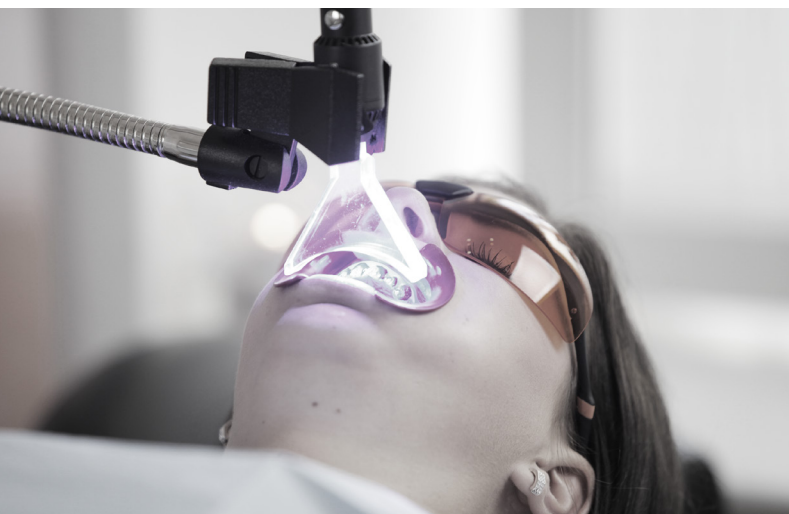

TANDBLEKNING PÅ KLINIK

Brilliant Smile är det ledande varumärket i Sverige för säker och effektiv tandblekning och resultaten är mycket tydliga – i genomsnitt 7 nyanser vitare vid en komplett klinikbehandling. Upprepade behandlingar behövs normalt inte för att uppnå tillfredsställande resultat.

Brilliant Smiles klinikblekning är perfekt för de som önskar snabba och effektiva resultat på ett bekvämt sätt. Behandlingen utförs på klinik vid ett och samma tillfälle och tar ca 1,5 timme. Man börjar med att putsa tänderna för att ta bort ytliga fläckar och applicerar sedan Protector längs med tandköttskanten för att skydda tandkötet från gelen. Det finns inget behov att täcka alla mjukdelar, eftersom ljuset som används vid blekningen är fritt från skadliga våglängder. Väteperoxidgel appliceras direkt på tänderna och den mörka gelen absorberar snabbt det blå plasmaljuset. Plasmaljuset i sig bleker inte, dess syfte är att påskynda blekningsprocessen genom att aktivera gelen. Under behandlingen appliceras gelen totalt 3 gånger.

Vid användning av andra tandblekningsmetoder är biverkningar såsom känslighet och ilningar mycket vanliga. Biverkningar är dock sällsynta med Brilliant Smiles produkter. Den främsta orsaken till detta är att vi endast använder gel med neutralt pH-värde (7), vilket innebär att blekning inte kommer förändra emaljstrukturen eller etsa tandytan. Våra preparat innehåller dessutom ingredienser som lindrar och motverkar ilningar, samt stärker tänderna och reparerar skador på tandemaljen. Detta betyder att patienten faktiskt får friskare och starkare tänder i slutändan.

En annan typisk orsak till känslighet kan vara ljusenheter som avger värme i samband med blekning, exempelvis laser. Detta är mycket smärtsamt och obehagligt för patienten och kan faktiskt skada tandnerven permanent. Brilliant Smiles Plasma LED-enheter är mycket effektiva utan att avge värme. Plasmaljus befinner sig dessutom inom det synliga ljusspektrat och är därmed helt fritt från cancerframkallande UV-ljus och skadliga våglängder.

I slutet av behandlingen appliceras NanoSeal Total+ på tänderna. Detta är en lösning som innehåller nanostrukturerad fluor vilket förseglar och remineraliserar emaljen omedelbart. Tillämpning av NanoSeal Total+ minimerar risken för ilningar och gör det även möjligt för patienten att äta och dricka vad som helst direkt efter behandling.

SNABB OCH EFFEKTIV

- Genomsnitt 7 nyanser vitare efter en behandling
- Utförs på klinik vid ett tillfälle
- En behandling är normalt tillräcklig
- Enkel procedur för utövaren
- Aktivering med plasmaljus påskyndar blekningsprocessen

MINIMERAR BIVERKNINGAR

- Gel med neutralt pH-värde - blekning kommer därför inte skada emaljen
- Tillsatser i gelen motverkar ilningar och stärker emaljen
- Plasma LED-ljus utan värmeutveckling
- NanoSeal Total+ appliceras vid slutet av behandlingen för att remineralisera och försegla emaljstrukturen

PLASMA LED

Brilliant Smiles Plasma LED-enheter är några av de mest kraftfulla tandbleknings- och härdningslamporna på marknaden. Brilliant Smiles blekgeler är utvecklade tillsammans med plasma LED-teknologin för att optimera aktivering av väteperoxiden. Som resultat går blekningsprocessen snabbare och blir mer effektiv jämfört med blekning utan ljus.

Plasma LED Light

BS028

Plasma LED Light är verksam mellan 400-490 Nm med en effekt på 2500 Mw., därför är den perfekt i tandbleknings- och härdningssyfte.

Med ljusenheten medföljer både standardspets för härdning samt ljusspridare avsedd för klinikkblekning. Ljusenheten är lätt och smidig och levereras tillsammans med ett smalt och justerbart stativ som enkelt kan ställas undan mellan användningarna.

Plasma LED Pro

BS442

Plasma LED Pro är vår nyaste modell som är baserad på samma plasma LED-teknologi som dess föregångare. Istället för en enda LED-källa har Pro 10 stycken som är placerade tätt bredvid varandra. Detta ger följande fördelar:

- Plasmaljuset får bättre och jämnare spridning
- Dubbel effekt
- Förkortar behandlingsintervallen med 30%



IN-OFFICE GEL

Brilliant Smiles geler för klinikblekning finns i olika koncentrationer av väteperoxid, vilket gör att behandlingen lätt kan anpassas för olika typer av patienter och marknader. Den unika mörklila gelen absorberar ljuset, vilket i sin tur ökar och intensifierar aktiveringen av väteperoxiden i gelen.

Följande punkter är dock samma för samtliga klinikblekningsgeler:

- Gelen kommer i en tvåvägsspruta, med peroxidlösning i den ena och aktiveringsvätska i den andra. Dessa blandas automatiskt genom blandningspetsen vid applicering av gelen direkt på tänderna. Blandnings- och endotippar medföljer i gelpaketet.
- Alla Brilliant Smiles geler är pH-neutrale och därmed varken etsar eller skadar emaljen.
- De innehåller kaliumnitrat som lindrar ilningar och fluor som remineraliserar och stärker emaljen.
- Klinikblekningsgelen är mörklila för att effektivt absorbera ljuset från Brilliant Smile Plasma LED-enheter. Ljuset aktiverar gelen och accelererar blekningsprocessen.
- Gelen appliceras tre gånger vid ett och samma behandlingstillfälle.
- En förpackning räcker till 2 patienter.
- Gelen måste förvaras i kylskåp.



PowerWhite^{evo}

BS103

35% väteperoxid

Behandlingstid: 3 x 10 minuter

Medicinteknisk produkt med CE-certifikat, regleras därmed inte av kosmetikalagstiftningen. Ger bra och snabba resultat. På grund av den korta exponeringstiden är risken för ilningar förhållandevis liten, trots den höga väteperoxidhalten.

StandardWhite^{evo}

BS102

20% väteperoxid

Behandlingstid: 3 x 20 minuter

Medicinteknisk produkt med CE-certifikat, regleras därmed inte av kosmetikalagstiftningen. Lämplig för patienter med känsliga tänder. Den ökade behandlingstiden säkerställer jämförbara resultat med PowerWhite^{evo}.

PerfectWhite^{evo}

BS192

6% väteperoxid

Behandlingstid: 3 x 20 minuter

Kosmetisk produkt utvecklad för den Europeiska marknaden i enlighet med kosmetikalagstiftningen. Innehåller en ökad mängd aktivatorer, vilket gör gelen i kombination med Brilliant Smiles Plasma LED (i synnerhet Plasma LED Pro) anmärkningsvärt effektiv trots den låga väteperoxidhalten.



Protector kit

BS106

Brilliant Smiles Protector är en integrerad del av behandlingsregimen för klinikblekning och har som syfte att skydda tandköttet från blekningsgelen.

Protector är ett flytande plastmaterial som appliceras med hjälp av en engångsspets som medföljer i paketet. Den ljusa blå färgen på materialet är avsiktligt utformad för att man tydligt ska kunna urskilja denna från tändernas och tandköttets färg. Protector härdas med Brilliant Smile Plasma LED. Ingen värme produceras under denna procedur. Väl härdad sitter Protector säkert fast och förhindrar gel från att komma i kontakt med tandköttet. Efter avslutad behandling avlägsnas skyddet i ett stycke.

- En förpackning räcker till minst 6 patienter.



NanoSeal Total+

BS079

NanoSeal Total+ appliceras på tänderna i slutet av klinikbehandling för att minimera risken för ilning och för att skydda mot nya missfärgningar. Det är en lösning som innehåller nanostrukturerad fluorapatit och kalciumfluorid, vilket återuppbygger och remineraliserar emaljen omedelbart.

Utan försegling med NanoSeal Total+ måste patienten undvika sura och missfärgande drycker och livsmedel i 72 timmar efter behandling för att bibehålla bästa möjliga resultat, samt skölja munnen med fluor 2 gånger dagligen under samma period. Med NanoSeal Total+ är denna procedur onödig.

Flaska med lösningen säljs i ask tillsammans med applikatorer och mätkoppar för engångsbruk.

- En förpackning räcker till minst 20 patienter.



TILLBEHÖR

Munhållare

Medium (blå)
BS060

Large (röd)
BS017



Skyddsglasögon

BS074 (2 par medföljer vid köp av lampa)



E-vitamintops

BS077 (100-pack)



RE: FRESH

Brilliant Smiles re:refresh är en enklare tandblekningsbehandling som utförs på klinik. Man använder en mild blekningsgel (6% väteperoxid) som appliceras i en specialdesignad bettskena och aktiveras med Brilliant Smile Plasma LED Pro.

Tänderna ljusbehandlas vanligtvis i 2 x 20 minuter, men vid behov kan man lägga till ytterligare 20 minuter vid samma behandlingstillfälle (totalt 3 x 20 min).

Resultat vid all typ av tandblekning är individuella och beror på typen och graden av missfärgningar. I genomsnitt ger en re:refresh-blekning 3-5 nyanser vitare tänder.

re: fresh kit BS380

Kitet har allt som behövs för att utföra standardbehandlingen (2x20 min) på 3 individuella patienter.

Kitet innehåller:

- 3 re: fresh bettskenor
- 3 Dental Cleansers
- 1 PerfectWhite^{evo} blekningsgel
- Bruksanvisning





TANDBLEKNING HEMMA

Att bleka tänderna hemma är oftast ett billigare alternativ om man jämför med behandlingar som utförs på klinik. Det tar lite längre tid, men samma resultat uppnås efter ca 1-2 veckor. Brilliant Smile erbjuder ett varierat utbud för hemmabruk, så att var och en kan finna en behandling som passar ens individuella behov, preferenser och livsstil.

Whitening^{evo} strips

Den diskreta plastremsan fästs direkt på tänderna, vilket gör den till den enklaste hemblekningsmetoden hittills. Inga skenor, inga konstigheter, inget kladd, bara smidig tandblekning med goda resultat efter 1-2 veckors användning.



Home whitening kit

Det kompletta hemblekningskitet innehåller allt som behövs för 7 dagars behandling med specialanpassade bettskenor. Det finns 3 sorters gel att välja mellan, vilket möjliggör vidare individuell anpassning för att tillgodose varje patients enskilda behov.



WHITENING^{evo} STRIPS



Brilliant Smiles Whitening^{evo} strips är en tandblekningsprodukt för hemmabruk. Behandlingen är smidig att utföra på egen hand, effektiv och framförallt helt säker. Produkten liknar en tunn genomskinlig plastremsa med en mild tandblekningsgel på ena sidan, som ska fästas direkt på tandraden. Gelen innehåller 6 % väteperoxid.

Whitening^{evo} strips är engångsremсор som ligger styckförpackade - en remsa för överkäken och en för underkäken i samma förslutna styckpåse. I varje paket medföljer 14 styckpåsar, vilket med andra ord räcker till 14 dagars behandling.

Whitening^{evo} strips används i 1-2 timmar/dag, i 14 dagar eller tills man är nöjd med resultatet. De flesta når önskat resultat redan efter 7 dagars användande. Remсорna som blir över kan du spara och använda vid ett senare tillfälle om så önskas.

Whitening^{evo} Strips

BS415 (14 st)



Användarinstruktioner:

- Plocka av remsan från plastfilmen och applicera direkt på rena och torra tänder, med gelsidan mot tänderna. Stryk fingrarna längs med remsan så den sitter fast och vik in kanten på baksidan av tänderna.
- Låt remsan sitta kvar 1-2 timmar, beroende på hur länge du vill bleka dina tänder.
- Remsorna är nästintill osynliga och kan därför användas "on-the-go", till exempel under tiden man gör sig iordning inför en fest eller på väg till jobbet.
- När du är klar drar du av remsan och slänger den. Brilliant Smile rekommenderar att du undviker tobak och kraftigt färgad mat och dryck under hela behandlingsperioden för att säkerställa att du får bästa möjliga resultat.

HOME WHITENING KIT

Brilliant Smile Sweden erbjuder en komplett regim för hemblekning med mild gel som appliceras i en specialanpassad bettskena. Skenorna bereds genom avtryck på kliniken. Det finns tre olika typer av gel att välja mellan, vilket gör att behandlingen kan anpassas till patientens behov för resultat och bekvämlighet. De kompletta kiten säljs endast genom tandvården. Vårt exklusiva "Home whitening kit" innehåller allt som behövs för en behandling som pågår i 7 dagar, samt kompletterande produkter för både före- och efterbehandling:

- **WHITENINGboost TOOTHPASTE**

Tar snabbt bort plack och ytliga missfärgningar. Används före eller under behandling.

- **DENTAL CLEANSER (7 st)**

Putsduk för engångsbruk. Dessa används för att rengöra tänderna precis innan man placerar skenan i munnen.

- **HOME WHITENING GEL (3 x 2 g)**

En liten mängd gel appliceras i skenan eller direkt på tänderna, innan skenan placeras i munnen.

- **WHITENINGevo TANDKRÄM**

Förhindrar bildandet av nya fläckar, löser upp plack och stärker dina tänder. Används två gånger dagligen för att behålla tänderna friska och vita.

Home whitening kit

BS538 MaxiWhite^{evo}
BS289 FlashWhite^{evo}
BS288 DeepWhite^{evo}

10-pack

BS537 MaxiWhite^{evo}
BS284 FlashWhite^{evo}
BS287 DeepWhite^{evo}





Samtliga geler från Brilliant Smile har neutralt pH vilket innebär att de varken skadar emaljen eller orsakar överkänslighet. Varje spruta innehåller 2g gel som räcker till minst 2 appliceringar för både över- och underkäken. Gelerna är dels tillgängliga som en del av hemblekningskitet, men säljs även i 10-pack för refillköp.

FLEX

MaxiWhite^{evo}

Denna unika formel är en blandning av väteperoxid och karbamidperoxid, med en kombinerad frigörelse av fria radikaler motsvarande 6% väteperoxid. Väteperoxiden aktiveras omedelbart och har maximal effekt de första 2 timmarna. Eftersom karbamidperoxid bryts ner till väteperoxid över tid, når det sin maximala effekt efter 2-9 timmar. I praktiken är MaxiWhite^{evo} fullt aktiv från början av varje behandlingstillfälle upp till 9 timmar, till skillnad från preparat med endast en oxiderande substans.

MaxiWhite^{evo} är pH-neutral och innehåller tillsatser som minimerar irringar och sensibilitet.

Beroende på intensitet och typ av missfärgningar är rekommenderad behandling mellan 1-9 timmar per dag/natt. Effekten av 1-2 timmars användning per dag är oftast tillräcklig för att uppnå tillfredsställande resultat, men för svårt missfärgade tänder kommer full tid ge optimala resultat.

DAG

FlashWhite^{evo}

FlashWhite^{evo} innehåller 6% väteperoxid och är lämplig för dagblekning med behandlingstiden 1-2 timmar per dag. Eftersom väteperoxid är

enda blekande ingrediensen finns det inget behov av att förlänga tiden ytterligare då den maximala effekten minskar snabbt efter 2 timmar.

NATT

DeepWhite^{evo}

DeepWhite^{evo} innehåller 18% karbamidperoxid som enda blekande ingrediens. Karbamidperoxid bryts ner till 1/3 väteperoxid över tid, vilket gör att gelen motsvarar 6% väteperoxid i styrka. DeepWhite^{evo} är lämplig för nattblekning med behandlingstid på 2-9 timmar per dag/natt.

Generellt rekommenderar Brilliant Smile MaxiWhite^{evo} för långvariga behandlingar, eftersom biverkningar med denna är minimala. För äldre, icke-känsliga patienter med mycket mörka missfärgningar kommer dock nattblekning med DeepWhite^{evo} ge det allra bästa resultatet.



MUNVÅRD MED WHITENING

De flesta munvårdsprodukter som idag marknadsförs som lågbudget "whitening"-produkter i butiker, har ingen bevisad effekt. De fåtal produkter som har en faktisk effekt brukar uppnå denna genom en hög slipverkan. Detta är något som skadar tändernas emalj och ska därför inte användas under längre perioder.

Brilliant Smiles munvårdsserie löser upp ytliga missfärgningar med hjälp av aktiva ingredienser och har ingen skadlig slipverkan. Dessa ingredienser är väl beprövade och vanligt förekommande i sofistikerade munvårdsprodukter. Studier som bevisar de aktiva ingrediensernas effekt finns väl dokumenterade.

Till skillnad från många andra producenter som har olika tandkrämer för olika behov (sensitive, whitening, karies kontroll etc.), så har Brilliant Smile samlat alla fördelar i sina samtliga produkter:

- Skyddar effektivt mot karies
- Stärker emaljen och bidrar till god munhälsa
- Förebygger, vårdar och lindrar ilningar och känsliga tänder
- Motverkar effektivt plack och tandsten
- Förebygger tandlossning och tandköttsinflammation
- Motverkar dålig andedräkt
- Ger vitare tänder och motverkar uppkomst av nya missfärgningar

3 STEG MOT ETT VITARE LEENDE

1

Munskölj

Whitening^{evo} mouthrinse löser upp ytliga missfärgningar och gör dessa lättare att borsta bort. Används 2 gånger dagligen, skölj i 1 minut innan tandborstningen.

2

Boost-behandling

Whitening^{boost} toothpaste är en intensivkur för snabb borttagning av ytliga missfärgningar. Används 2 gånger dagligen i 2 veckor, byts därefter ut mot tandkrämen nedan.

3

Tandkräm

Whitening^{evo} toothpaste innehåller aktiva ingredienser som löser upp ytliga beläggningar och skyddar tänderna, utan skadlig slipverkan på emaljen. Används 2 gånger dagligen, man bör borsta 2-3 min för bästa resultat.

WHITENING^{evo} TOOTHPASTE

BS090 (65 ml x 12)

Rek. pris: 149 kr

Brilliant Smile har utvecklat en exklusiv gelbaserad tandkräm som effektivt gör dina tänder vitare utan skadlig slipverkan och bidrar till bättre munhälsa. Genom att använda Brilliant Smile whitening^{evo} toothpaste 2 gånger dagligen motverkar du effektivt bildandet av missfärgningar på dina tänder, medan du även skyddar tänderna mot karies, plack, känslighet och ilningar. Whitening^{evo} toothpaste innehåller aktiva ingredienser som löser upp ytliga missfärgningar och skonsamt rengör tänderna utan att skada emaljen.

Aktiva ingredienser:

- Hydroxyapatit reparerar emaljen, förbättrar styrka och hårdhet samt fyller blottade dentinkanaler med tandens eget material. Detta ger ett långvarig skydd som minskar smärta och förebygger ilningar i tänderna.
- Tetrapotassium Pyrofosfat motverkar bildandet av plack och löser upp ytliga beläggningar.
- Zinkcitrat motverkar dålig andedräkt och i kombination med Tetrapotassium Pyrofosfat hindrar det effektivt uppkomsten av nya missfärgningar.
- Kaliumnitrat motverkar känslighet och ilningar.
- Poloxamer bildar en hinna på tänderna och skyddar därmed mot nya missfärgningar.
- Fluor motverkar uppkomst av karies.



WHITENING^{evo} MOUTHRINSE

BS131 (250 ml x 12)

Rek. pris: 198 kr

Brilliant Smile whitening^{evo} mouthrinse är en speciellt framtagen profylaktisk munskölj som är effektiv mot ytliga missfärgningar, ilningar, isningar, plack och karies. Munsköljen löser mycket effektivt upp ytliga missfärgningar och gör dessa lättare att borsta bort. Därför används den med fördel i kombination med Brilliant Smiles tandkrämer.



WHITENING^{boost} TOOTHPASTE

BS163 (20 ml x 24)

Rek. pris: 98 kr

Gelbaserad tandkräm som gör tänderna vitare, med hjälp av BrilliantBoost™ - teknologin: en unik kombination av aktiva ingredienser som snabbt löser upp ytliga missfärgningar, utan skadlig slipverkan.



BrilliantBoost™ - teknologin

BrilliantBoost™ - teknologin är en unik kombination av aktiva ingredienser som effektivt löser upp och avlägsnar ytliga missfärgningar utan slipverkan; tetrapotassium pyrofosfat, zinkcitrat, natrium tripolyfosfat och bikarbonat. Poloxamer bildar en skyddande barriär som effektivt skyddar mot nya missfärgningar. Dessutom innehåller tandkrämen kaliumnitrat som motverkar ilningar och fluor som skyddar mot karies.



WHITENING^{evo} DENTAL CLEANSER

BS297 (10-pack)

Rek. pris: 49 kr

Whitening^{evo} dental cleanser är en rengöringsremsa för engångsbruk. Den träs på fingret och gnuggas mot tänderna för att ta bort smuts och beläggningar och ger en fräsch mintsma i munnen. Den är perfekt att ha i handväskan om du är på språng eller om du bara vill fräscha upp tänderna efter en kopp kaffe eller ett glas rödvin.

KONTAKT

Adress: Backa Bergögata 16M

SE-42246 Hisings Backa

Telefon: +46 771-41 41 41

Fax: +46 31-708 60 95

Epost: info@brilliantsmile.se

Hemsida: www.brilliantsmile.se



BRILLIANT SMILE™

SWEDEN